



Clinical Experience



Technical Competence



EasyFlow nCPAP

Neonatoloji için invaziv olmayan ventilasyon sistemi aksesuarı

- + Çok yumuşak, esnek prong
- + Kendinden sızdırmazlık sağlayan maske
- + Doğrudan alna yerleştirmek için yastıklı yapışkan olmayan silikon jel ped
- + Geleneksel bonelere alternatif olarak esnek kafa bandı


Yeni:

- + Şimdi silikon jel alın pedi ve kafa bandı ile birlikte



EasyFlow nCPAP

Fritz Stephan GmbH'in yeni EasyFlow sistemi, prematüre ve yenidoğan bebeklerin anatomisine en iyi biçimde uyar. Mükemmel şekilde uyum sağlayan pronglar ve maskeler, hassas invaziv olmayan ventilasyon için önemlidir. EasyFlow sisteminin kullanımı kolaydır ve SOPHIE ve STEPHANIE yenidoğan ventilasyon sistemleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

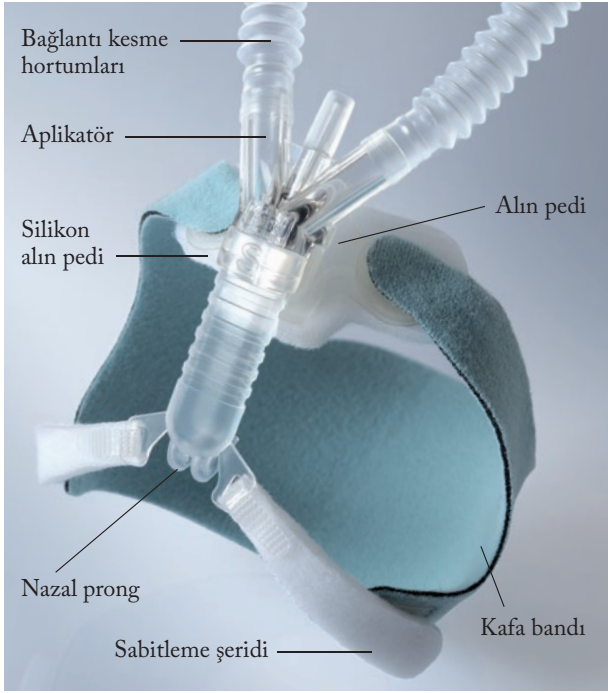

Kullanımı kolay sistem aksesuarları, yeni kafa bandı, bir silikon jel alın pedi, işlenmemiş metal içeren bir aplikatör desteği, mıknatıslı bir aplikatör ve binazal prong veya maskeden oluşur. Uzunluk ve yükseklik derece derece ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak bağlantı kesme hortumları ve ilaç püskürtücü bağlanabilir.

Tüm sistem bileşenlerinin kullanımı kolaydır ve bebek hastalara en iyi biçimde uyar.

Farklı boyutlar: Esnek ayarlanabilir kafa bantları üç boyutta mevcuttur. EasyFlow nCPAP – Mükemmel uyum, hassas, güvenilir.

Yeni yastıklı silikon alın pedi, jel yapısının yapışma özelliği sayesinde alna yapışır. Daha fazla sabitleme gerektirmez. Biyouyumlu silikon jel herhangi bir çözücü yapışkan içermez.

Üç boyutta mevcut olan **kafa bandı**, başlığın baş çevresine tam olarak uyup uymadığı ile ilgili hemşireye tam bir kontrol sağlar. Kafa bandı sadece yumuşak sabitleme şeritleri ile binazal pronglar veya maskelerin hizalanmasını destekler. **Sabitleme şeritlerini** bağlamak için, cırt cırtlı pedlerle birlikte sağlanan yumuşak ve biyouyumlu kumaştan üretilmiştir.

Maksimum rahatlık için yüksek kalitede, çok yumuşak ve esnek silikon kauçuk kullanılmıştır.

Nazal prong, cilt veya mukoz membranın tahriş olmasını engeller ve mükemmel şekilde uyum sağlayan anatomik tasarımı ile septuma oturmaz ve böylece buradaki stresi önler.

Özel kanatlı tasarımı ile, **maske** aynı zamanda optimum bir uyum ve kendinden sızdırmazlık sağlar.

Yastıklı silikon jel alın pedi hortumların ve nazal prongun veya maskenin takıldığı **aplikatörü** tutar. Bütünleşik mıknatıs, en uygun basınç ve gerilim azaltma için aplikatörün milimetrik hassasiyetle aplikatör desteğine konumlandırılmasını sağlar.

Bağlantı kesme hortumları kullanım rahatlığını artırır ve bağlantı sabitliğini iyileştirir. Ağır ventilasyon hortumlarındaki basınç ve gerilimi önemli ölçüde azaltıp bu hortumları hastanın burnundan ayırır.



Hızlı ve güvenilir nCPAP hasta arabirimleri, invaziv olmayan ventilasyon tedavisinin başarısı için esastır. Yeni silikon jel alın pedi, teslim edildikten hemen sonra hastanın alnına takılabilir. Verniks kaseosa'da bir miktar temizlik gerekebilir. Hasta NICU'da daha rahat şekilde tedavi edilene kadar binazal pronglar yeterli bir nCPAP tedavisi sağlar.



Hasta rutin bakıma geçirildiğinde, esnek ayarlanabilir kafa bantları uygulanabilir. Kafa bandı cırt cırtlara bağlı yumuşak sabitleme şeritleri ile binazal prongların veya maskelerin hizalanmasını sağlar.



11 farklı boyut için renk kodlu olan denenmiş ve test edilmiş bonelerimiz kullanılmaya devam edecektir. Cilt dostu malzemeler klinik ortamda kesin olarak kanıtlanmıştır ve birçok avantaj sunmaktadır. Mükemmel uyumlu, hassas ve güvenli EasyFlow nCPAP-boneleri.





Fritz Stephan GmbH
Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackebach
Almanya

Telefon +49 +6439-91 25-0
Faks +49 +6439-91 25-111
info@stephan-gmbh.com
www.stephan-gmbh.com



Clinical Experience
Technical Competence

EasyFlow nCPAP: sistem aksesuarına genel bakış

Boneler (alın desteği ve sabitleme şeritleri ile birlikte teslim edilir)					
Boyut	Renk	Baş çevresi	Ağırlık	Miktar	Parça numarası
XS		20 - 22 cm	500 - 700 g	1	1 701 61 019
S		22 - 24 cm	700 - 900 g	1	1 701 61 020
M		24 - 26 cm	900 - 1.200 g	1	1 701 61 021
L		26 - 28 cm	1.200 - 1.600 g	1	1 701 61 022
XL		28 - 30 cm	1.600 - 2.400 g	1	1 701 61 023
XXL		30 - 33 cm	2.400 - 3.000 g	1	1 701 61 024
3XL		33 - 36 cm	3.000 - 4.200 g	1	1 701 61 025
4XL		36 - 39 cm	4.200 - 6.000 g	1	1 701 61 026
5XL		39 - 42 cm	6.000 - 7.300 g	1	1 701 61 027
6XL		42 - 45 cm	7.300 - 8.800 g	1	1 701 61 028
7XL		45 - 48 cm	> 8.800 g	1	1 701 61 029

Kafa bandı micro set, Parça Numarası 1 701 61 040			
şunları içerir:	Baş çevresi	Ağırlık	
Kafa bandı micro	20 - 28 cm	500 - 1.350 g	
2 adet Sabitleme şeridi, beyaz			
Alın desteği			

Kafa bandı mini set, Parça Numarası 1 701 61 041			
şunları içerir:	Baş çevresi	Ağırlık	
Kafa bandı mini	28 - 36 cm	1.350 - 3.700 g	
2 adet Sabitleme şeridi, beyaz			
Alın desteği			

Kafa bandı maxi set, Parça Numarası 1 701 61 042			
şunları içerir:	Baş çevresi	Ağırlık	
Kafa bandı maxi	36 - 48 cm	3.700 - 8.400 g	
2 adet Sabitleme şeridi, beyaz, uzun			
Alın desteği			

	Miktar	Parça numarası
Silikon jelli yastıklı alın pedi	5	1 701 61 018
Yastıklı alın pedi	5	1 701 61 017

	Miktar	Parça numarası
Mıknatıslı aplikatör ve basınç sızdırmazlık kapağı	5	1 701 61 161
Bağlantı kesme hortum seti Ø 10 mm	5	1 701 63 408
Bağlantı kesme hortum seti Ø 12 mm (F&P)	5	1 701 63 409
Maske/Prong Uzantısı	5	1 701 61 000

Pronglar		
Boyut	Miktar	Parça numarası
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

Maskeler		
Boyut	Miktar	Parça numarası
XS	5	1 701 61 005
S	5	1 701 61 012
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015